


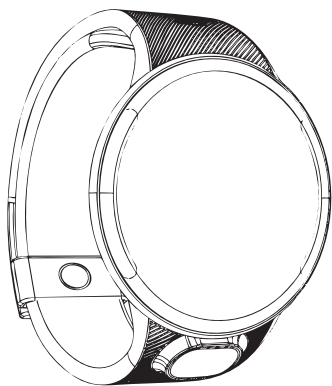

vyvo

BioSense

WATCH


คู่มือ
เริ่มต้น
การใช้งาน



reddot winner 2025

ยินดีต้อนรับสู่มิติใหม่ของ Vyvo เทคโนโลยี!

BioSense วอช เปิดมิติใหม่ของอุปกรณ์สวมใส่ ด้วยการเป็นสมาร์ทวอชที่บางที่สุด
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

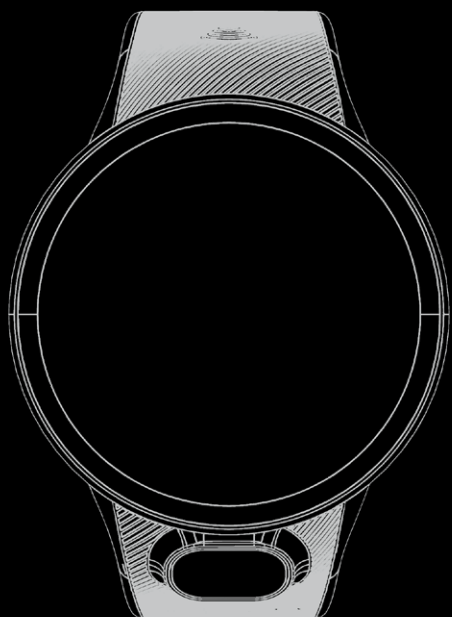

มาเริ่มกันเลย!

vyvo


BioSense
WATCH

อุปกรณ์ภายในกล่อง


ในกล่องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้



BioSense วอช

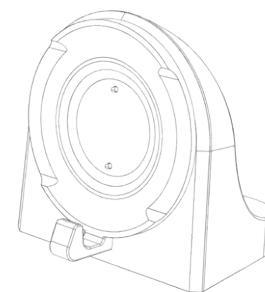

แท่นชาร์จ

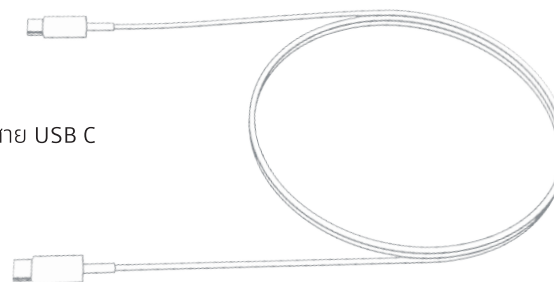

สาย USB C

1



vyvo

BioSense
WATCH


2

วิธีชาร์จนาฬิกาของคุณ

1. เปิดกล่องและนำอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากกล่อง
2. ต่อสายชาร์จ USB ไทป์ C เข้ากับแท่นชาร์จ
3. เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ แท่นชาร์จ หรือพาวเวอร์แบงก์
4. จัดตำแหน่งหมุดชาร์จที่ด้านหลังของนาฬิกาให้ตรงกับตัวเชื่อมต่อแม่เหล็ก
5. นาฬิกาจะเปิดและแสดงสถานะการชาร์จบนหน้าจอ หากแบตเตอรี่หมดอย่างสมบูรณ์ อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่หน้าจอจะแสดงผล
6. กรุณาชาร์จนาฬิกาของคุณเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

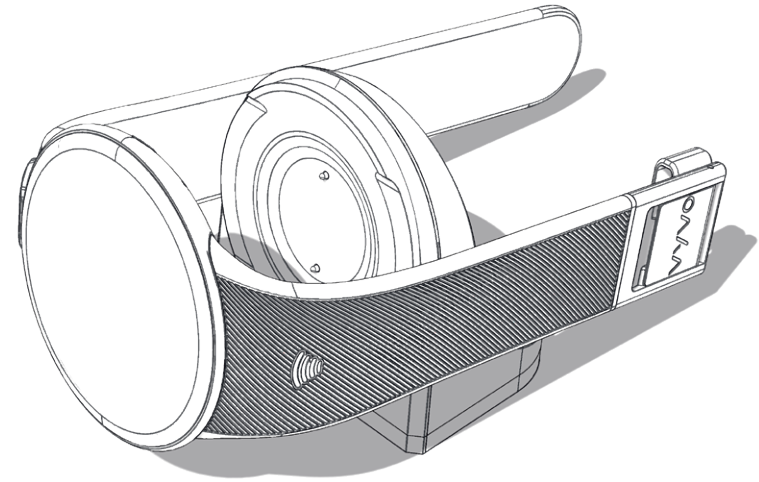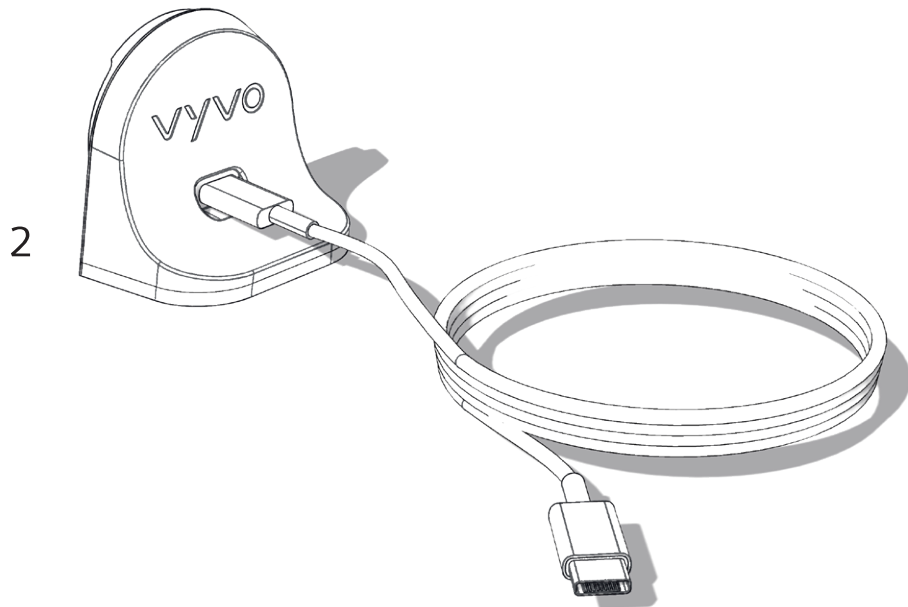

4

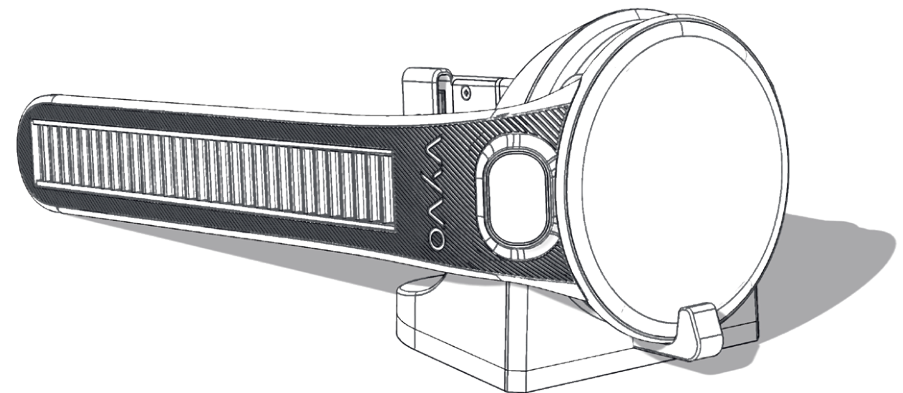

5

vyvo

BioSense

WATCH

3

วิธีการเชื่อมต่อ

- หลังจากที่นาฬิกาของคุณทำการชาร์จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะทำการเชื่อมต่อนาฬิกาของคุณเข้ากับแอปพลิเคชัน **Vyvo Smart** และเริ่มต้นการใช้งาน
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน:



- เปิดแอปพลิเคชันและทำการเข้าสู่ระบบบัญชี Vyvo ของคุณ หรือสร้างบัญชีใหม่ ขั้นตอนนี้สะดวกและรวดเร็ว!
- เมื่อคุณอยู่ในแอปพลิเคชัน ไปที่หน้าจอ อุปกรณ์ และแตะไปที่ปุ่ม + ตรงด้านขวาบน และเลือก วอชซ์ เพื่อทำการเพิ่ม BioSense วอชซ์ ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนบนสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของอุปกรณ์และบริการในแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณายอมรับสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดของแอปพลิเคชัน

vyvo

BioSense

WATCH

4

การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ติดตามสุขภาพเชิงลึกของ BioSense วอชซ์ กรุณาไปที่หน้าจอ อุปกรณ์ ในแอปพลิเคชันและดำเนินการปรับเทียบค่าความดันโลหิตให้เสร็จสมบูรณ์ โดยป้อนค่าความดันโลหิตจากการวัดล่าสุดที่ใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

เพื่อความแม่นยำอย่างต่อเนื่อง กรุณาทำการปรับเทียบใหม่ทุกๆ สัปดาห์

vyvo


BioSense

WATCH

5

การใช้งาน BioSense วอชซ์

- เพื่อทำการเปิดเครื่อง: กดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดจนกว่าโลโก้จะปรากฏขึ้น
- เพื่อทำการปิดเครื่อง: กดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดและเลือก "ปิดเครื่อง" บนหน้าจอ
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างสั้นๆ: เปิดหน้าจอและยืนยันการดำเนินการ
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้: เปิด/ปิดเครื่อง, รีบูต, และโหมดฉุกเฉิน (SOS)
- เพื่อรีเซ็ตและกู้คืน: ไปที่ การตั้งค่า > รีเซ็ต เพื่อคืนค่าโรงงาน
- แตะที่หน้าจอสองครั้ง: ทำการเปิดหน้าจอนาฬิกา
- แตะที่หน้าจอสามครั้ง: ทำการเปิดใช้งาน VAI OS

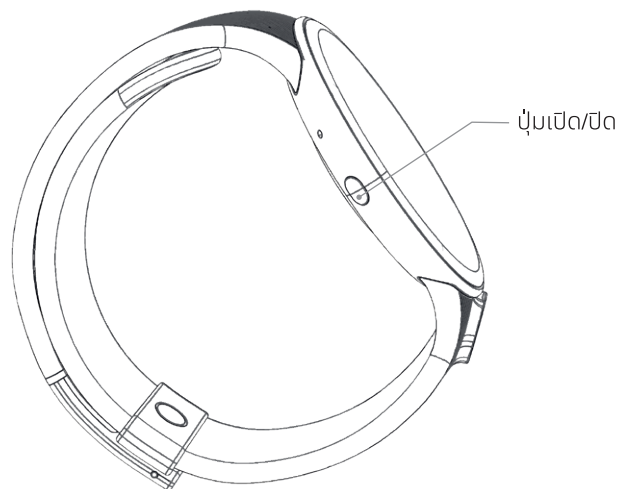

vyvo

BioSense


WATCH

6

การควบคุมและการใช้งาน

- ทำทาง การปิดหน้าจอ
 - **ปัดขึ้น** > การแจ้งเตือน
 - **ปัดลง** > การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
 - **ปัดไปด้านซ้าย** > ฟีเจอร์สุขภาพ, ผลลัพธ์การนอนหลับ, AI, Odee (สำหรับยอดคงเหลือใน OdeePay/VyvoPay วอลเล็ท), การออกกำลังกาย และการตั้งค่า
 - **ปัดไปด้านขวา** > สมาร์ท ฟีเจอร์ (โทเค็น วอลเล็ท, ดัชนีสุขภาพ, ฟีเจอร์ และสถิติการเคลื่อนไหวทางกายภาพ)
- การชำระเงินแบบไร้สัมผัสด้วย VyvoPay
 - ชำระเงินอย่างปลอดภัยเพียงแตะผ่าน NFC
 - สามารถใช้งานได้แม้แบตเตอรี่ของนาฬิกาหมด
 - โปรดทราบว่าแอป VyvoPay สามารถทำการแปลงสินทรัพย์เดิมให้เป็นโทเค็นได้ กรุณาเยี่ยมชม www.vyvo.support เพื่อรับชมวิดีโอสอนการใช้งาน VyvoPay รวมถึงวิธีเพิ่มบัตรชำระเงิน
- การตั้งค่าและการปรับแต่ง
 - ปรับความสว่าง เสียง และการสั่น ได้โดยตรงจากตัวนาฬิกา
 - ปรับแต่งและเลือกหน้าจอนาฬิกาได้โดยตรงจากตัวนาฬิกา
- ปัญหาทั่วไป
 - นาฬิกาเปิดไม่ติด: โปรดชาร์จอุปกรณ์
 - นาฬิกาไม่ทำการเชื่อมต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน บลูทูธ แล้ว และลองเชื่อมต่อใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน

สำหรับคำถามหรือปัญหาอื่น ๆ รวมถึงเอกสารคู่มือเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกา กรุณาไปที่ www.vyvo.support.

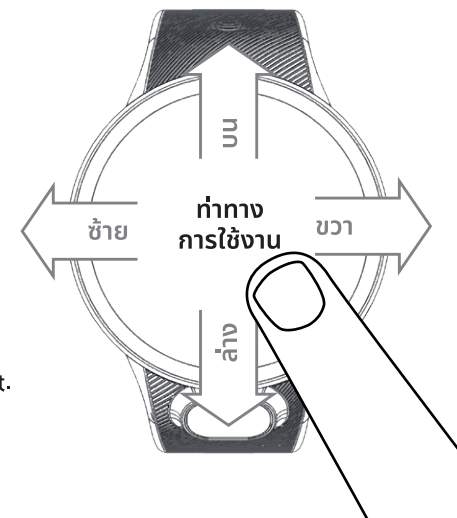

vyvo


BioSense
WATCH

7

แนะนำฟีเจอร์สำคัญ

การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ

เพื่อทำการวัดค่าได้อย่างแม่นยำ กรุณาใส่นาฬิกาของคุณห่างจากบริเวณกระดูกข้อมือหนึ่งนิ้วมือ

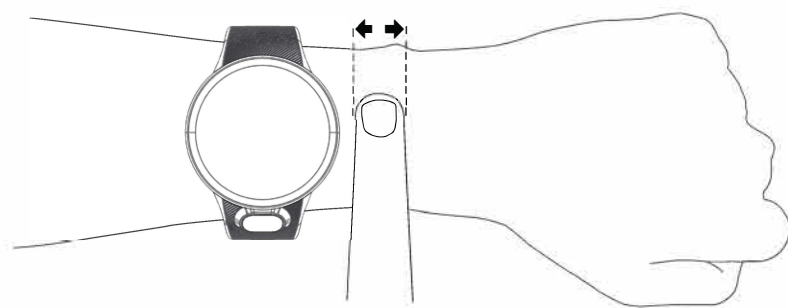

vyvo

BioSense
WATCH

8

การดูแลรักษา

การดูแลอุปกรณ์

1. กรุณาอย่าให้วัตถุแหลมคมในการทำมาสะอาดอุปกรณ์
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดที่มีสารเคมี สารละลายตัวทำลาย หรือสารกันแมลง ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์เสียหายได้
3. ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงหลังจากสัมผัสกับคลอรีน น้ำเค็ม ครีมนกันแดด แอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง หรือสารเคมีรุนแรงอื่นๆ เนื่องจากการสัมผัสสารเหล่านี้เป็นเวลานานอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
4. หลีกเลี่ยงการกดปุ่มขณะอยู่ใต้น้ำ
5. หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรงและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ได้
7. หลังจากการออกกำลังกายแต่ละครั้ง กรุณาล้างสมาร์ทวอช์ด้วยน้ำสะอาด

การทำความสะอาดอุปกรณ์

หมายเหตุ: แม้แต่การสัมผัสกับเหงื่อหรือความชื้นเป็นเวลานานเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ขั้วชาร์จเกิดการกัดกร่อนเมื่อทำการชาร์จอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพในการชาร์จได้

1. ใช้ผ้าฝ้ายชุบน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยน เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างเบามือ
2. กรุณาปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิทหลังทำความสะอาด

การกันน้ำ

ระดับ IP67 เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน

vyvo

BioSense




WATCH

9

ชื่อเรียกส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงาน

ทำความเข้าใจอุปกรณ์ของคุณ

ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบสำคัญของ BioSense วอชซ์ ของคุณ

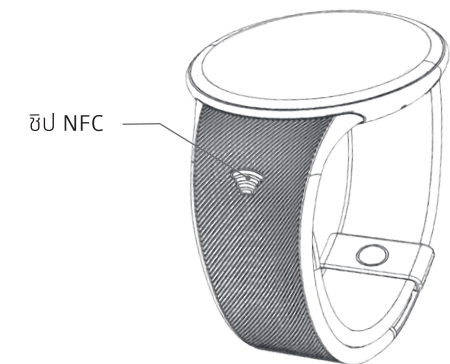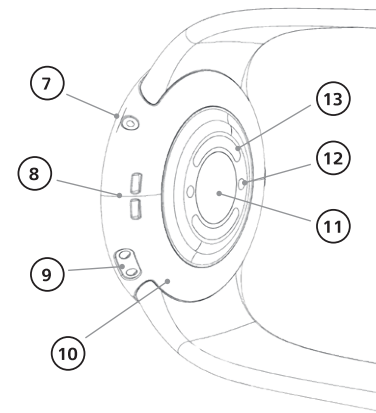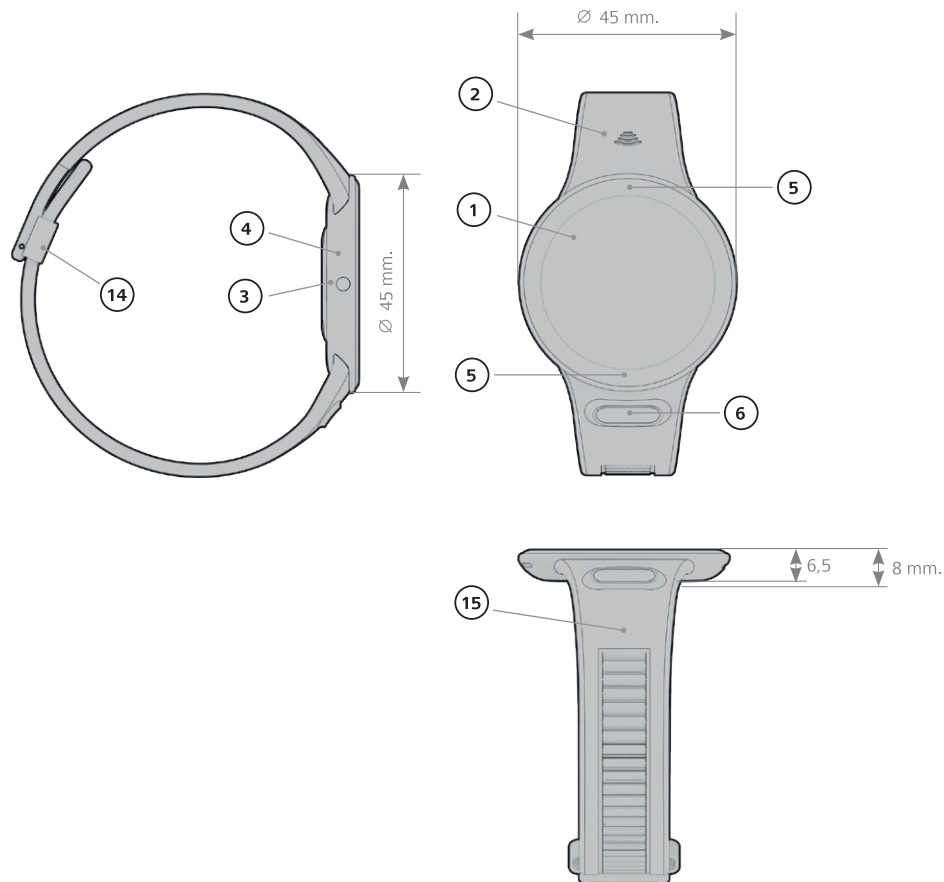

คำอธิบาย

1. หน้าจอ AMOLED 1.43"
2. ชิป NFC Vyvo Pay ภายใน
3. ปุ่ม(เปิด/ปิด) / การแจ้งเตือนการเตือน / SOS
4. ไมโครโฟน
5. ECG & BIA อิเล็กโทรด
6. อิเล็กโทรด BP, SpO2, APG
7. เซนเซอร์ความชื้นและอุณหภูมิ
8. ลำโพง
9. เซนเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร
10. ชิปเข้ารหัส Vyvo Smart Chain VSC-PoSe
11. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย, การตรวจจับภาวะ AFIB อย่างต่อเนื่อง, อัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง, และ SpO2
12. แบตเตอรี่
13. ด้านหลังของ ECG และ BIA อิเล็กโทรด
14. ตัวล็อกอะลูมิเนียม
15. สายซิลิโคนที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองปรับขนาดได้ตั้งแต่ขนาดข้อมือไซส์ 5 ถึง 12

vyvo

BioSense
WATCH




10

การปรับสายนาฬิกา

หากสายรัดไม่พอดีตามที่ต้องการ คุณสามารถปรับความยาวของสายได้โดยไม่ต้องขันตอนง่ายๆ ดังนี้:

- A. มองหารอยเส้นที่แนะนำสำหรับการตัดซึ่งอยู่ด้านในของสายรัด
- B. หลังจากวัดข้อมือของคุณอย่างแม่นยำแล้ว ให้ตัดตามเส้นที่ต้องการ
- C. สวมใส่ BioSense วอช์ ตามปกติ

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวัดขนาดถูกต้องก่อนตัดสายรัดตามเส้นอ้างอิง Vyvo จะไม่รับผิดชอบต่อสายรัดที่ถูกตัดอย่างไม่ถูกต้อง

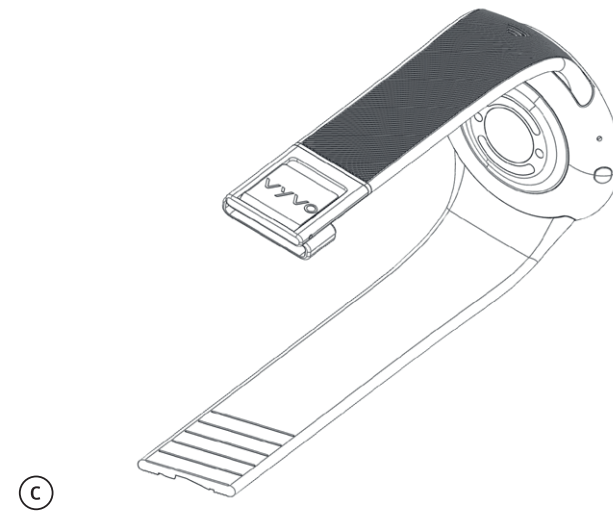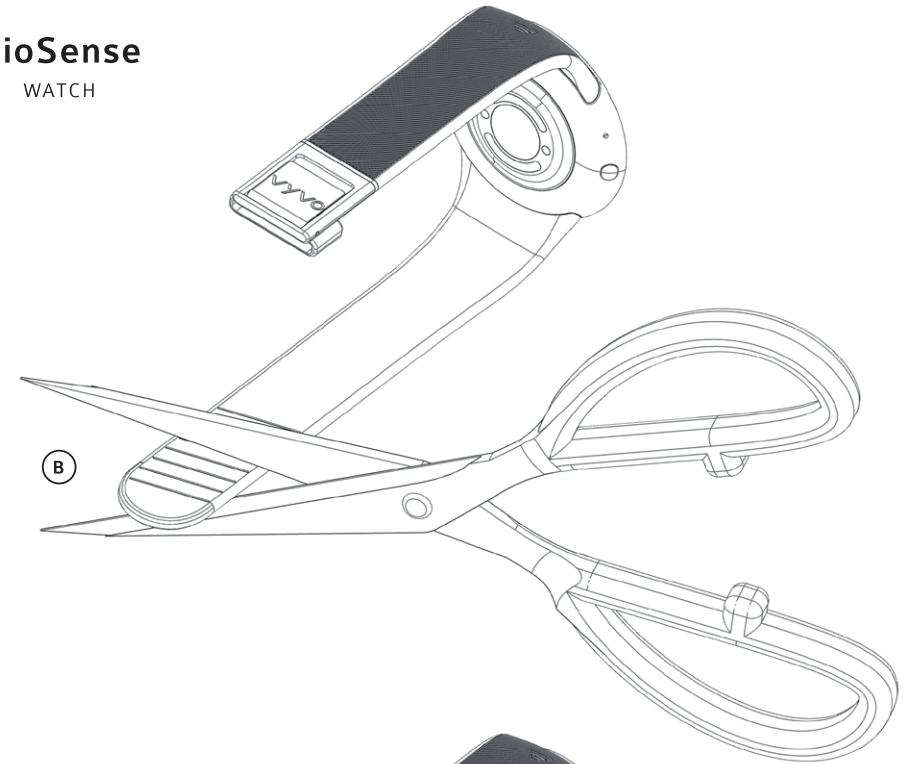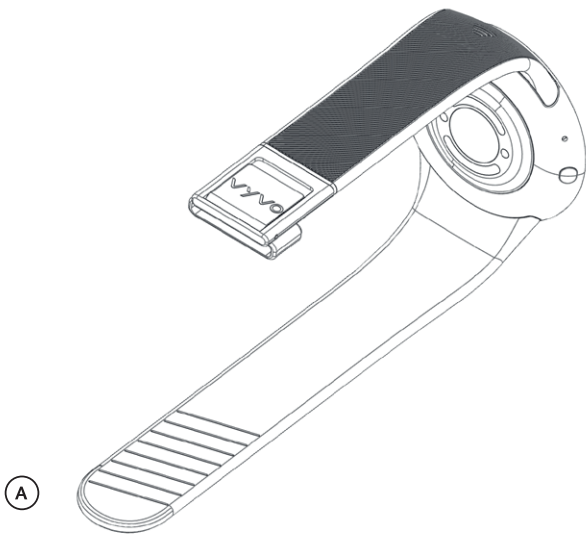

vyvo

BioSense

WATCH

11

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ	1. วัสดุสายรัดข้อมือ: ซิลิโคนเจลเหลว + การเคลือบสองสี PA, ลวดลายพื้นผิวแห้ง + การปรับแต่งด้วย UV, มีแม่เหล็กในตัวสำหรับการยึดติด	
	2. อิเล็กทรอนิกส์หัวใจ: สแตนเลส 316L เคลือบ PVD สีดำ	
	3. กรอบกลาง: สแตนเลส 316L ผ่านกระบวนการ MIM + CNC + ชัดเงา + เคลือบ PVD + AF	
	4. ฝาหลัง: PA ฝังด้วยสแตนเลส 316L จำนวน 2 ชิ้น + เคลือบ PVD + พื้น POGO 2 ชิ้น	
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	ขนาด	Ø 45.2 มม., ความหนา 6.5 มม., ความยาว 240 มม.
	น้ำหนัก	49 กรัม
	สี	ดำ
ข้อมูลจำเพาะหน้าจอ	ประเภท	Oled
	ไซส์	1.43"
	จำนวน dots	466x466 dots
	การแสดงผล	16.7M (RGB x 24bits)
ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์	MCU	ATS3089
	หน่วยความจำภายใน	Nor 64Mbit / PSRAM 128Mbit
	หน่วยความจำแฟลช	1Gbit
	ปุ่ม	Power key*1
	การสัมผัส	หน้าจอสัมผัสแบบ capacity
เสียง	ไมค์	Sisonic MSM381ACB045
	ลำโพง	8Ω, MAX: 0.7 W
การเชื่อมต่อ	บลูทูธ	BLE 5.0
	ฟีเจอร์การชำระเงินผ่าน NFC	พร้อมใช้งาน VyvoPay

เซนเซอร์	ไจโรสโคป	ST-LSM6DS3TR-C/ Reserve STK8321
	เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ	PAH8311
	ECG+BIA	30001
	การตรวจจับออกซิเจนในเลือด + ความดันโลหิต ที่ปลายนิ้ว	MAX 32664 + 30101
	อุณหภูมิผิวหนัง	117
	การเข้ารหัส	SLS32
	เซนเซอร์ AQI	ZMOD4410A + ZMOD4510A
แบตเตอรี่	เซนเซอร์ความชื้น	HS3101
	ประเภท	ลิเทียมโพลีเมอร์
	แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน	3.8 V
	ความจุ	200mAh
	ระยะเวลาในการชาร์จ	1 ชั่วโมง
แอปพลิเคชัน	VYVO Smart	ฟีเจอร์ด้านสุขภาพ: อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, พลังงาน, ความเครียด, ECG, BIA, APG, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, การตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, อุณหภูมิ, การนอนหลับ
		iOS 10.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป
		ข้อมูลกิจกรรม: จำนวนก้าว แคลอรี่ การยืน
การกันน้ำ	กันน้ำได้	การเตือน: อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ความดันโลหิต, ออกซิเจนในเลือด, อุณหภูมิ, ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
		IP61



BioSense

WATCH

ฟังก์ชัน

ตัวชี้วัดสุขภาพ

VAI OS	โต้ตอบกับ VAI OS ได้โดยเลือกผ่านเมนูอุปกรณ์หรือแตะหน้าจอนาฬิกาสามครั้ง
ดัชนีคุณภาพอากาศภายใน & ภายนอกอาคาร	ดัชนีคุณภาพอากาศทั่วไปรองรับการวัดแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการบันทึกทุกๆ 10 นาที ดัชนีคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคารรองรับการวัดด้วยตนเองที่เริ่มต้นจากตัวอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน โดยผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
HR	ตัวเลือกการรองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุก 10 นาที และรองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
BR	รองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานะการเปิดหรือปิดการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ) โดยทำการวัดอัตราหัวใจทุก 10 นาที รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
ECG	รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน และสัมผัสอิเล็กโทรดด้านบนและด้านล่างหน้าปัดนาฬิกาด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ ผลลัพธ์จะถูกอัปโหลดเพื่อการวิเคราะห์ AI และรายงานในแอปพลิเคชันเท่านั้น
BIA	รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน และสัมผัสอิเล็กโทรดด้านบนและด้านล่างหน้าปัดนาฬิกาด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ ผลลัพธ์จะถูกอัปโหลดเพื่อการวิเคราะห์ AI และรายงานในแอปพลิเคชันเท่านั้น
พลังงาน	รองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุกชั่วโมง รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
ความเครียด	รองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุกชั่วโมง รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
BP	เชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อทำการสอบเทียบค่าความดันโลหิต รองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุกชั่วโมง รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน
APG	ผลลัพธ์จะถูกอัปโหลดเพื่อการวิเคราะห์ AI และรายงานในแอปพลิเคชันเท่านั้น รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน
SpO2	รองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุกชั่วโมง รองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน

ตัวชี้วัดสุขภาพ

AFib	ทำการเปิดหรือปิดในแอปพลิเคชันหรือบนอุปกรณ์ เมื่อเปิดแล้ว ระบบจะเปิดใช้งานทันที และไฟสีเขียวที่ด้านล่างนาฬิกาจะสว่างขึ้นตลอดเวลา ผลลัพธ์จะถูกอัปโหลดเพื่อการวิเคราะห์ AI และรายงานในแอปพลิเคชันเท่านั้น
การนอนหลับ	ประเมินค่าอัตราหัวใจโดยอุปกรณ์ทุกคืน และรายงานบนอุปกรณ์และในแอปพลิเคชัน รวมถึงคุณภาพการนอนหลับ และหากเปิดใช้งานการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง จะรวมถึงการนอนหลับ REM และจำนวนครั้งที่รบกวนการนอนหลับ
อุณหภูมิผิวหนัง	ตัวเลือกการรองรับการวัดอัตราหัวใจแบบ 24 ชั่วโมง โดยทำการวัดทุก 10 นาที และรองรับการวัดด้วยตนเองได้จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน ตรวจจับโดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์หรือในแอปพลิเคชัน

HR	ฟังก์ชันที่กำหนดค่าแอปพลิเคชัน เมื่อตรวจพบการแจ้งเตือนการเตือน ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผล BioSense วอชซ์ และอีเมลจะถูกส่งไปยังรายชื่อที่ระบุไว้ จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่มีสัญญาณ ข้อมูลจะถูกส่งอย่างต่อเนื่อง ต้องทำการเปิดแอปพลิเคชันในพื้นหลังของสมาร์ทโฟน
BR	
BP	
SpO2	
Afib	
อุณหภูมิผิวหนัง	
ดัชนีคุณภาพอากาศ	

จำนวนก้าว	รับชมได้ในแอปพลิเคชันหรือหน้าจอนาฬิกา
แคลอรี	
การยืน	

อิเล็กโทรด	สามารถพบอิเล็กโทรดได้ด้านบนและด้านล่างหน้าจอของ BioSense วอชซ์ และจำเป็นสำหรับการวัด ECG และ BIA	ECG	วางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบนแผ่นอิเล็กโทรดที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกา
		BIA	แตะอิเล็กโทรดที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกาด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือตามลำดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือขยับและขวาชของคุณไม่สัมผัสกัน

VyvoPay	วอลเล็ทที่ปลอดภัย	VyvoPay รุ่นที่สอง
---------	-------------------	--------------------

vyvo

BioSense
WATCH

12

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร่างกายอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- BioSense วอทช์ ใช้หลอด LED เพื่อวัดข้อมูลสุขภาพด้วยแสง โดยจะปล่อยแสงสีเขียวและแสงแฟลช ปรึกษาแพทย์หากคุณเป็นโรคลมบ้าหมูหรือไวต่อแสงแฟลช
- ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนเริ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจวัตรหรือโปรแกรมการออกกำลังกายใดๆ
- อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวินิจฉัย ติดตาม รักษา บำบัด หรือป้องกันโรค
- คำการอ่านอัตราการเต้นของหัวใจมีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเราขอปฏิเสธการรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการตีความที่ไม่ถูกต้อง
- แม้ว่าเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัลที่ข้อมือมักจะให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้งาน แต่เทคโนโลยีนี้ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้การอ่านอัตราการเต้นของหัวใจไม่แม่นยำภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์ และประเภทและความหนักเบาของกิจกรรม
- การติดตามกิจกรรมของคุณบนแอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวและค่าอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่อุปกรณ์มอบมานั้นมีจุดประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมและค่าต่างๆ ของคุณอย่างใกล้ชิด แต่ก็อาจไม่แม่นยำทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำหรับจำนวนก้าว การนอนหลับ ระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ และแคลอรี
- ห้ามแช่หรือนำแบตเตอรี่สัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามให้อุปกรณ์สัมผัสกับแหล่งความร้อนหรือในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถที่ไม่มีคนดูแล กลางแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ให้นำอุปกรณ์ออกจากรถหรือเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง เช่น กล้องเก็บสัมภาระ
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
- หากต้องการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นเวลานาน โปรดจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือ
- ห้ามใช้สายไฟและ/หรือสาย USB ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือจัดหาโดยผู้ผลิต โปรดใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคู่มือ

vyvo

BioSense
WATCH

13

ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

การวัดค่าบางกรณีจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน VYVO Smart ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ Apple เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป

1. BioSense วอทช์ มีระดับการกันน้ำที่ 50 เมตรตามมาตรฐาน ISO 22810:2010 สามารถใช้อุปกรณ์นี้ในกิจกรรมที่อยู่ในน้ำตื้น เช่น การว่ายน้ำในสระหรือมหาสมุทร อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ BioSense วอทช์ ในการดำน้ำลึก การเล่นสกีน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่มีความเร็วสูงหรือการอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานในระดับตื้น
2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น BioSense วอทช์ และบริการที่เกี่ยวข้องไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อวินิจฉัย รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ ในด้านความแม่นยำ Vyvo เทคโนโลยีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพบางอย่างได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์และบริการของ Vyvo ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เทียบเท่ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์
3. ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หากคุณมีภาวะใดๆ ที่มีอยู่ก่อนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Vyvo
4. ฟังก์ชันบางอย่างอาจถูกจำกัดในบางประเทศ



ขอบคุณ!

vyvo.com/watch